

addition mini Junior/Sensitive

GB
Instructions for use

Precision impression series for babies, infants & adolescents

Specially designed for the needs of children and the specific requirements of paediatric adaptions.

Junior Children and adolescents, easy-flow, neon-green with scent of gummi bear

Sensitive Babies, infants and sensitive patients, ultra-easy flow, does not contain dyes, pigments, flavouring or preserving agents

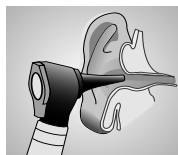


Fig. 1

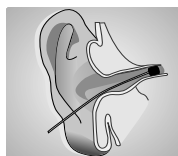


Fig. 2

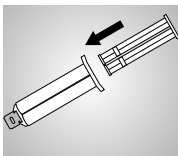


Fig. 3

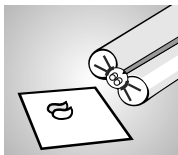


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

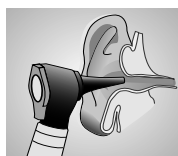


Fig. 8

1. Ear preparation

Before taking an impression, the auditory canal and the eardrum have to be examined (Fig. 1). If distinctive features are found (e.g. inflammations or perforation of the eardrum, tubes) impression must not be taken. The auditory canal has to be cleaned. In case of insufficient cleaning, remaining cerumen can cause retarded setting resp. inhibition of setting process.

Before taking the impression, the eardrum must always be protected with an impression plug/cotton placed at the end of the external auditory canal in front of the eardrum (Fig. 2). The use of **vented impression pads** is recommended. Now **addition mini Junior/Sensitive** is injected directly into the prepared ear of the patient as described under point 2.

2. Mixing and applying

Dispensing is performed with the minimix system. Insert the plunger in the body of the cartridge (Abb. 3). If necessary, the mini mixing gun can be used. Remove the cap from the cartridge by turning. Carefully extrude a small amount of material to ensure proper flow from both orifices (Fig. 4). Insert mixing cannula into guide grooves on cartridge and turn clockwise to lock in position (Fig. 5). If required, a piece of silicone tubing (Flexi tube) can also be pushed onto the mixing cannula. Again, bleed small amount to ensure uniform and even material flow. Leave mixing cannula on cartridge after use, thus sealing the cartridge. Press out a small amount and discard.

In order to allow a true rendition of the ear canal without deformation, the impression material must have a low viscosity and be pourable. The higher the viscosity, the higher the pressure build-up and thus the deformation of the child's ear canal. The good flow properties of **addition mini Junior/Sensitive** are therefore desirable and cannot be compared with those of conventional materials for adults.

3. Dispensing

addition mini Junior/Sensitive flows ultra-easily, thus allowing pressureless, constant filling. Slowly apply the impression material into the auditory canal until the concha is filled completely (Fig. 6). Keep the end of the cannula/tube immersed in the material during dispensing. Tip: Hold the head slightly at an angle or put on some foil in order to prevent any oozing out. Leave mixing cannula on cartridge after use, thus sealing the cartridge. After curing remove the impression carefully from the ear (Fig. 7). Finally it is essential to re-examine the ear to make sure it has not been damaged (Fig. 8). The level of the minimix cartridge can be checked according to how far the plunger is protruding.

Important working hints

- Cured impression materials are chemically inert, pots on clothing should be avoided.
- Be sure to remove all traces of impression material from the patient's ear.
- Latex gloves and latex contaminated surfaces as well as cerumen, cremes and resins may inhibit the setting reaction of **addition mini Junior/Sensitive** (we recommend standard gloves made of nitrile rubber or polyethylene).
- A careful preparation (point 1) as well as a thorough cleaning of the auditory canal is required before taking an impression.
- For processing soft, high-elasticity silicone materials with a low final hardness (< 30 Shore A), special grinding sleeves are generally better than conventional metal milling machines. We recommend **Detax grinding sleeves**: Round, Ø 5 mm (Art.No. 03006, 10 pcs.) or Pointed, Ø 5 mm (Art.No. 03011, 10 pcs.).

Safety advice

The impression taking of the external auditory canal has to be executed by trained specialist staff only. The working instructions and precautionary measures have to be strictly observed. DETAX is not liable for any damage caused by improper application of the impression material.

Further information: Silicone based materials are proven a million times. On condition of a proper application, undesired effects are not to be expected. However, reactions of the immune system like allergies, irritations, cannot be absolutely excluded. In case of doubt, we recommend to make an allergy test before the application of the material.

Indications for use:

- Ear impression with:
 - Babies, infants, adolescents
 - Sensitive patients

Technical data:

- **Mixing volume:** 10 ml (minimix cartridge)
- **Mixing ratio:** 1:1
- **Colour code:**
 - Junior** Base: transparent catalyst: neon-green
 - Sensitive** Base: transparent catalyst: white
- **Application time:** approx. 30 sec.
- **Time in the ear:** approx. 2:00 min. at body temperature
- **Total setting time:** approx. 2:30 min.
- **Final hardness:** approx. 25 Shore A
- **Strain in compression:** approx. 10 % ± 1 %
- **Recovery from deformation:** 99,8 %
- **Linear dimensional change:** < 0,2 %
- **Application:** At 23 °C ± 2 °C / 73 °F ± 4 °F, 50 ± 5 % rel. humidity
- **Storage:**

25°C

77°F

15°C

59°F

Ordering information:

addition mini Junior
Standard packing **03439**
4 x 10 ml minimix cartridges
8 mixing cannulas
minimix, green
1 plunger, flowchart

Refill bag 03440
8 x 10 ml minimix cartridges
1 plunger, flowchart

addition mini Sensitive
Standard packing **03436**
4 x 10 ml minimix cartridges
8 mixing cannulas
minimix, green
1 plunger, flowchart

Refill bag 03437
8 x 10 ml minimix cartridges
1 plunger, flowchart

Mixing cannulas 03446
25 pcs. minimix, green 1:1

Flexi tube 03448
20 cm for minimix cannulas

Mixing gun mini 03447
for minimix cartridge

Vented impression pads 03449
24 pcs., Ø 7 mm

DETAX

GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Str. 4 · 76275 Ettlingen/Germany
Telephone: 0 72 43/510-0 · Fax: 0 72 43/510-100
www.detax.de · post@detax.de

Made in Germany



02/2012

addition mini Junior/Sensitive

F
Mode d'emploi

Empreintes de précision en série pour des bébés, des enfants et des adolescents

Spécialement adapté aux besoins des enfants et aux exigences particulières des adaptations pédiatriques.

Junior Enfants et adolescents, fluide, vert fluo, parfum bonbon
Sensitive Bébés, enfants en bas âge et patients sensibles, extrêmement fluide, sans colorant, sans conservateur et sans arôme

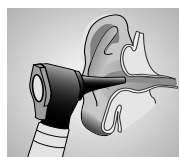


Fig. 1

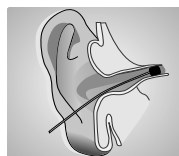


Fig. 2

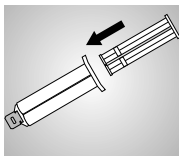


Fig. 3

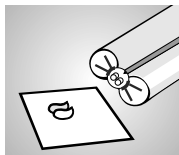


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

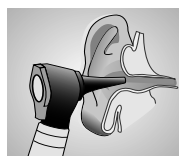


Fig. 8

1. Préparation de l'oreille

Procéder à un examen soigneux du conduit auditif et du tympan avant la prise d'empreinte (fig. 1). En cas de résultat suspect par exemple, lésions, inflammations ou perforation du tympan, yoyo, ne pas réaliser d'empreinte. Nettoyer le conduit auditif. Un nettoyage insuffisant peut retarder ou inhiber la prise du matériau, notamment s'il reste du cérumen dans le conduit.

Avant la prise d'empreinte, protéger impérativement le tympan avec un tampon spécial. Placer le tampon à l'extrémité du conduit auditif externe, devant le tympan (fig. 2). Il est recommandé d'utiliser des **protège-tympons à libération de pression**. Ensuite, appliquer **addition mini Junior/Sensitive** (voir point 2) directement dans l'oreille préalablement préparée et tamponnée, en veillant à ce qu'aucune bulle ne se forme.

2. Mélange et dosage

Le produit est extrudé par pression à l'aide du système mini-mix. Positionner le piston dans le corps de la cartouche (fig. 3). Il est possible d'utiliser le pistolet mélangeur mini si nécessaire. Retirer le dispositif d'obturation de la cartouche en le faisant tourner. Avant de poser la canule de mélange, faire sortir une petite quantité de matériau jusqu'à ce que le matériau sorte en même quantité par les deux ouvertures (fig. 4). Pour fixer la canule de mélange, s'aider des guides sur la canule et sur la cartouche. Tourner la canule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la bloquer (fig. 5). Si nécessaire, glisser un morceau de tuyau flexible en silicone « Flexi tube » sur la canule de mélange. Extruder une petite quantité de résine et la jeter.

Pour permettre une représentation fidèle du conduit auditif sans le déformer, le matériau de prise d'empreinte doit être fluide et posséder une faible viscosité. Plus la viscosité est élevée, plus le matériau exerce de pression et risque de déformer le conduit auditif de l'enfant. C'est la raison pour laquelle **addition mini Junior/Sensitive** possède toute la fluidité souhaitée et ne se compare pas avec les matériaux traditionnellement utilisés pour les adultes.

3. Application

addition mini Junior/Sensitive présente une consistance très fluide, permettant ainsi une application homogène, sans qu'il soit besoin d'exercer de pression. Appliquer lentement le matériau de prise d'empreinte dans le conduit auditif et la conque (fig. 6). Pendant la procédure d'application, prendre garde à ce que la pointe de la canule ou du tuyau se trouve toujours au niveau du matériau que vous appliquez. Conseil : maintenir la tête légèrement penchée ou placer un film protecteur pour éviter que le matériau ne s'écoule hors de l'oreille. Après utilisation, laisser la canule de mélange sur la cartouche en guise de capuchon jusqu'à l'utilisation suivante. Lorsque le produit a pris, retirer délicatement l'empreinte (fig. 7). Examiner ensuite l'oreille afin de s'assurer qu'elle n'a pas été endommagée (fig. 8). Le niveau de remplissage de la cartouche minimix peut être contrôlé au niveau de la tige du piston.

Conseils d'utilisation importants

- Les matériaux d'empreinte polymérisés sont chimiquement stables – attention aux taches sur les vêtements.
- Ne pas laisser de restes de matériau de prise d'empreinte dans l'oreille.
- Les gants en latex et les surfaces contaminées par du latex, du cérumen, de la crème ou des matières plastiques peuvent inhiber le durcissement de **addition mini Junior/Sensitive** (nous recommandons de porter des gants en nitrile ou en polyéthylène).
- Une préparation soigneuse est indispensable avant toute prise d'empreinte (point 1), de même qu'un nettoyage du conduit auditif.
- Pour travailler les silicones souples, présentant une grande élasticité et une faible dureté finale (< 30 Shore A), il est généralement recommandé d'utiliser des coiffes de meulage adaptées plutôt que les fraises pour métaux habituelles. Nous vous conseillons **les coiffes de meulage Detax** : circulaires, Ø 5 mm (réf. 03006, 10 pcs) ou pointues, Ø 5 mm (réf. 03011, 10 pcs).

Remarque

La prise d'empreinte du conduit auditif externe avec du matériau d'empreinte ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et formé. Respecter les consignes de préparation et les mesures de sécurité. DETAX n'assume aucune responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte du matériau de prise d'empreinte.

Informations complémentaires : Les matériaux de prise d'empreinte en silicone ont été éprouvés à de nombreuses reprises, aucun effet indésirable n'est donc susceptible de survenir si l'utilisation est correcte. Des réactions immunitaires, par exemple des allergies ou des irritations, ne peuvent cependant pas être totalement exclues. En cas de doute, nous recommandons d'effectuer un test d'allergie avant l'utilisation du matériau.

Champs d'application:

Prise d'empreinte de l'oreille chez les:

- bébés, enfants et adolescents
- patients sensibles

Caractéristiques techniques:

- **Volume de mélange:** 10 ml (cartouche minimix)
- **Dosage:** 1:1
- **Couleur du produit:**
Junior
Base: transparent
Catalyseur: vert fluo
Sensitive
Base: transparent
Catalyseur: blanc
- **Temps d'application:** env. 30 sec.
- **Temps d'exposition dans l'oreille:** env. 2:00 min. à température du corps
- **Temps de prise total:** env. 2:30 min.
- **Dureté finale:** env. 25 Shore A
- **Déformation sous pression:** env. 10 % ± 1 %
- **Restitution après déformation:** 99,8 %
- **Changement dimensionnel linéaire:** < 0,2 %
- **Application:** À 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % d'humidité relative
- **Stockage :**



Informations à la commande:

addition mini Junior
Boîte standard 03439
4 x 10 ml minimix
cartouches

8 Canules de mélange
minimix, vertes
1 piston, organigramme

Sachet de recharge 03440
8 x 10 ml minimix
cartouches
1 piston, organigramme

addition mini Sensitive
Boîte standard 03436
4 x 10 ml minimix
cartouches

8 Canules de mélange
minimix, vertes
1 piston, organigramme

Sachet de recharge 03437
8 x 10 ml minimix
cartouches
1 piston, organigramme

Canules de mélange 03446
25 pcs. minimix, verte 1:1

Flexi tube 03448
20 cm pour mini canules

Pistolet mélangeur mini 03447
pour minimix cartouches

Tympons à libération
24 pcs., Ø 7 mm 03449

addition mini Junior/Sensitive

E
Modo de empleo

Serie de impresión de precisión para bebés, niños y jóvenes

Especialmente adecuado para las necesidades de niños y sus requisitos especiales de adaptación pediátrica.

Junior Niños y jóvenes, fluido, verde neón con aroma a gominola

Sensitive Bebés, pequeños y pacientes sensibles, extrafluido, sin colorantes, conservantes ni aromas artificiales

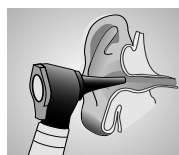


Fig. 1

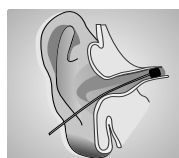


Fig. 2

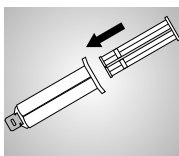


Fig. 3

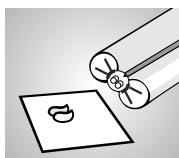


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

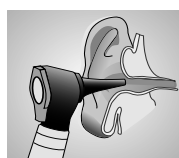


Fig. 8

1. Preparación del oído

Antes de realizar una impresión, examine cuidadosamente el conducto auditivo y el tímpano (Fig. 1). En el caso de un resultado llamativo (p. ej. lesiones, inflamaciones o perforación del tímpano, tubos de timpanostomía) no se debe realizar la impresión. Limpie el conducto auditivo. En el caso de una limpieza insuficiente, el cerumen residual puede retardar e incluso inhibir la polimerización. Antes de la toma de la impresión debe proteger al tímpano con un tapón de impresión. Coloque el tapón de impresión en el extremo del conducto auditivo exterior delante del tímpano (Fig. 2). Se recomienda el uso de **tapón de impresión vent** (con ventilación). A continuación puede inyectar **addition mini Junior/Sensitive** (ver Punto 2) sin burbujas directamente en el oído pretratado y taponado.

2. Mezcla y dosificación

La extrusión se realiza con el sistema mini-mix. Introduzca el émbolo en el cartucho (Fig. 3). En caso necesario, puede utilizarse la pistola de mezcla mini. Gire el cierre del cartucho para retirarlo. Exprima una pequeña cantidad de material hasta que aparezca una cantidad uniforme de silicona en los dos orificios de salida (Fig. 4). Para la colocación correcta de la cánula de mezcla utilice las guías en la cánula y en el cartucho. Para fijar la cánula, gírela en la dirección opuesta (Fig. 5). Para detenerlo, basta con girarlo hacia la derecha (Fig. 5). Si es necesario, también puede colocar un trozo de tubo de silicona flexible "Flexi tube" sobre la cánula de mezcla. Haga salir y deseche una pequeña porción. Tras el uso, deje la cánula de mezcla hasta la siguiente aplicación en el cartucho.

Para que la ilustración del conducto auditivo sea fiel y sin deformaciones, el material de impresión debe tener poca viscosidad y ser fluido. Cuanto mayor sea la viscosidad, mayor será la presión, lo que puede conllevar la deformación del conducto auditivo del niño. Las excelentes cualidades de fluidez de **addition mini Junior/Sensitive** son las adecuadas y no se pueden comparar con los materiales convencionales para adultos.

3. Aplicación

addition mini Junior/Sensitive es extrafluido, lo cual permite la entrada uniforme y sin presión. Inyecte el material de impresión lentamente en el conducto auditivo y en la concha (Fig. 6). Durante la aplicación, tenga en cuenta que la jeringa de la cánula/el tubo permanezca al nivel del material aplicado. Consejo: mantenga el cabezal ligeramente inclinado o coloque una lámina para evitar que salga el fluido. Tras la inyección, deje la cánula de mezcla a modo de tapón de cierre en el cartucho hasta la siguiente aplicación. Tras la polimerización puede extraer con cuidado el molde (Fig. 7). Por último, debe comprobar necesariamente la integridad del oído (Fig. 8). El nivel de llenado del cartucho de mezcla mini puede comprobarse con la salida de la barra del émbolo.

Indicaciones importantes relativas al procesado

- Los materiales de impresión polimerizados son químicamente estables: evite manchar la ropa.
- Compruebe que no queden restos del material de impresión en el oído.
- Los guantes de látex y las superficies contaminadas con látex, el cerumen, las cremas y diversos plásticos pueden inhibir la polimerización de **addition mini Junior/Sensitive** (recomendamos utilizar guantes de nitrilo o de polietileno).
- Antes de realizar una toma de impresión es necesaria una preparación (Punto 1) y una limpieza cuidadosa del conducto auditivo.
- Para el procesamiento de materiales de silicona blandos y de alta elasticidad con una dureza final baja (< 30 Shore A) las tapas de pulido especiales suelen ser más adecuadas que las fresas de metal convencionales. Recomendamos para ello las **tapas de pulido Detax**: redonda, Ø 5 mm (n.º art. 03006, 10 uds.) o en punta, Ø 5 mm (n.º art. 03011, 10 uds.).

Nota:

La toma de impresiones del conducto auditivo externo con material de impresión sólo debe ser realizada por especialistas debidamente formados. Se deben seguir las indicaciones de procesamiento y respetar las medidas de precaución. DETAX no se responsabiliza de los daños causados por una aplicación incorrecta del material de impresión.

Otra información: Los materiales de impresión de silicona han demostrado su eficacia en millones de personas, si se aplican correctamente no cabe esperar efectos indeseados. No obstante, por principio no se pueden excluir reacciones inmunológicas, como p. ej. alergias o irritaciones. En caso de duda, recomendamos que haga efectuar una prueba de alergia antes de la aplicación del material.

Campos de aplicación:

- Impresión de oídos de
- Bebés, niños, jóvenes
- Pacientes sensibles

Características técnicas:

- **Volumen de mezcla:** 10 ml (cartucho minimix)
- **Dosificación:** 1:1
- **Colores del producto:** Junior Base: transparente Catalizador: verde neón Sensitive Base: transparente Catalizador: blanco
- **Tiempo de aplicación:** aprox. 30 seg.
- **Tiempo de permanencia en el oído:** aprox. 2:00 min. a temperatura corporal
- **Tiempo total de fraguado:** aprox. <30 min.
- **Dureza final:** aprox. 25 Shore A
- **Deformación bajo presión:** aprox. 10 % ± 1 %
- **Reposición tras deformación:** 99,8 %
- **Cambio dimensional lineal:** < 0,2 %
- **Manejo:** A 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % humedad relativa.
- **Almacenamiento:**

15°C
59°F

25°C
77°F

Información para el pedido:

addition mini Junior

Presentación normal **03439**

4 cartuchos minimix de 10 ml
8 cánulas de mezcla minimix, verdes
1 émbolo, flujogramma

Bolsa reposición **03440**

8 cartuchos minimix de 10 ml
1 émbolo, flujogramma

addition mini Sensitive

Presentación normal **03436**

4 cartuchos minimix de 10 ml
8 cánulas de mezcla minimix, verdes
1 émbolo, flujogramma

Bolsa reposición **03437**

8 cartuchos minimix de 10 ml
1 émbolo, flujogramma

Cánulas de mezcla **03446**

25 pzs. minimix, verdes 1:1

Flexi tube **03448**

20 cm para minimix cánulas






Pistola dispensadora **03447**

para minimix cartuchos

Tapón de impresión con ventilación **03449**

24 pzs., Ø 7 mm

addition mini Junior/Sensitive

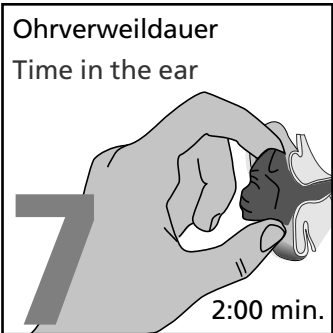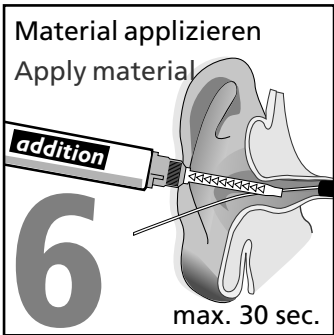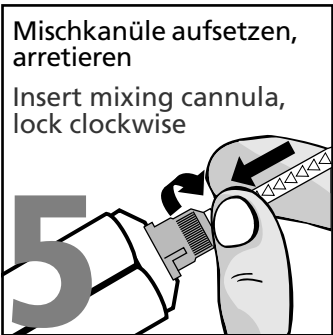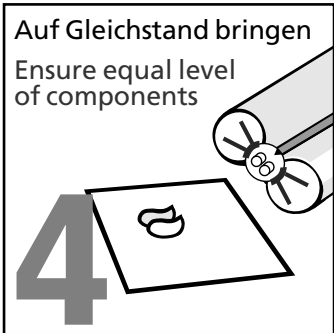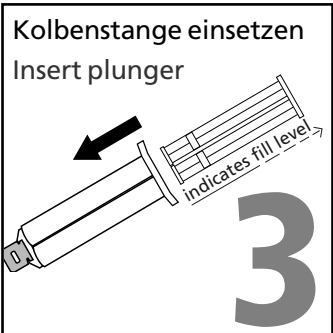

addition mini Junior/Sensitive

I
Istruzioni per l'uso

Impronte di precisione in serie per bambini, anche molto piccoli, e ragazzi

Materiale adatto in particolare per le esigenze dei bambini, e per i requisiti speciali in caso di adattamenti pediatrici.

Junior Bambini e ragazzi, fluido, verde neon, al profumo di caramelle gommosi
Sensitive Bambini, anche molto piccoli, e pazienti sensibili, extra fluido, senza conservanti, coloranti e aromi

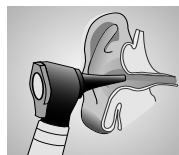


Fig. 1

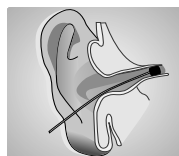


Fig. 2

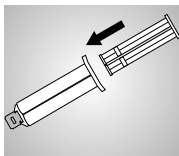


Fig. 3

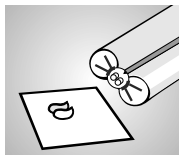


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

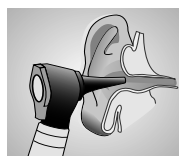


Fig. 8

1. Preparazione dell'orecchio

Prima della presa d'impronta, esaminare accuratamente il condotto uditivo e il timpano (Fig. 1). In presenza di reperti evidenti (ad es. lesioni, infiammazioni o perforazioni del timpano, tubuli) la presa d'impronta non può essere effettuata. Il meato acustico deve essere pulito. L'eventuale presenza di cerume residuo, dovuta a una pulizia insufficiente, può rallentare o inibire il processo di presa. Prima della presa d'impronta è indispensabile proteggere il timpano con un apposito tampone che deve essere posizionato al termine del condotto uditivo esterno, davanti al timpano (Fig. 2). Si raccomanda l'uso di **tamponi per impronta vent** (ventilati). A questo punto è possibile iniettare direttamente **addition mini Junior/Sensitive**, evitando la formazione di bolle d'aria, nell'orecchio pretrattato e protetto dal tampone (vedere punto 2).

2. Miscelazione e dosaggio

L'erogazione avviene mediante il sistema mini-mix. Inserire il punzone nel corpo della cartuccia (Fig. 3). Se necessario, è possibile utilizzare la pistola per miscelazione mini. Svitare il tappo della cartuccia e rimuoverlo. Prima di inserire la cannula di miscelazione erogare una piccola quantità di materiale fino a quando il silicone fuoriesce in modo uniforme da entrambe le aperture (Fig. 4). Inserire la cannula di miscelazione nelle apposite guide sulla cartuccia. Bloccare ruotando in senso orario (Fig. 5). Se necessario, applicare sulla cannula di miscelazione anche un tubo in silicone flessibile "Flexi tube". Estrudere una piccola quantità di materiale e gettarla. Dopo l'uso, lasciare la cannula di miscelazione inserita nella cartuccia fino all'applicazione successiva.

Per consentire una riproduzione fedele del condotto uditivo non deformato, il materiale per impronta deve essere a bassa viscosità e fluido. Maggiore è la viscosità, maggiore è la pressurizzazione e, di conseguenza, la deformazione del condotto uditivo del bambino. Le buone proprietà di scorrimento di **addition mini Junior/Sensitive** sono quindi una caratteristica positiva e non vanno messe a confronto con le proprietà dei materiali convenzionali per adulti.

3. Applicazione

addition mini Junior/Sensitive è extra fluido, quindi scorre uniformemente senza dover essere compresso. Far fluire lentamente il materiale per impronta nel condotto uditivo e nella conca (Fig. 6). Durante l'applicazione accertarsi che l'estremità della cannula/del tubo rimanga a livello del materiale inserito. Consiglio: Posizionare la testa leggermente inclinata o applicare la pellicola per impedire fuoriuscite. Dopo l'uso, lasciare la cannula di miscelazione sulla cartuccia, come tappo, fino all'applicazione successiva. Trascorso il tempo di presa, estrarre delicatamente l'impronta (Fig. 7). Al termine, verificare assolutamente l'integrità dell'orecchio (Fig. 8). Il livello di riempimento della cartuccia minimix può essere controllato in corrispondenza della sporgenza dell'asta dello stantuffo.

Istruzioni importanti per la lavorazione

- I materiali per impronta polimerizzati sono chimicamente inerti – evitare di macchiare gli indumenti.
- Non lasciare residui del materiale per impronta nell'orecchio.
- Guanti in lattice e superfici contaminate da lattice, cerume, creme e resine possono inibire la reazione di presa di **addition mini Junior/Sensitive** (si consiglia di indossare guanti in nitrile o polietilene).
- Prima di ogni presa d'impronta è necessaria un'accurata preparazione (punto 1) e un'adeguata pulizia del condotto uditivo.
- Per la lavorazione di materiali in silicone morbidi e ad elevata elasticità con ridotta durezza finale (< 30 Shore A) sono indicati preferibilmente cappucci abrasivi speciali piuttosto che frese in metallo tradizionali. Consigliamo i **cappucci abrasivi Detax**: Ø 5 mm: tondi (art.n° 03006, 10 pz.) o appuntiti (art.n° 03011, 10 pz.).

Avvertenza

La presa d'impronta del condotto uditivo esterno con materiale per impronta deve essere eseguita solo da personale esperto. Attenersi alle istruzioni per la lavorazione e alle avvertenze. DETAX declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un impiego scorretto del materiale per impronta. Ulteriori informazioni: I materiali per impronta a base siliconica sono stati testati milioni di volte. È possibile escludere la possibilità di reazioni avverse in caso di utilizzo conforme. Non è possibile tuttavia escludere completamente l'eventualità di reazioni immunitarie, come allergie o irritazioni. In caso di dubbio si consiglia di eseguire un test di allergia prima dell'utilizzo del materiale.

Campo d'impiego:

Impronta dell'orecchio in:

- bambini, anche molto piccoli, e ragazzi
- pazienti sensibili

Data tecnici:

- **Volume di miscelazione:** 10 ml (cartuccia minimix)
- **Dosaggio:** 1:1
- **Colore del prodotto:** **Junior** Base: trasparente Catalizzatore: verde neon **Sensitive** Base: trasparente Catalizzatore: bianco
- **Tempo di applicazione:** 30 sec. circa
- **Durata di permanenza nell'orecchio:** 2:00 min. circa temperatura del corpo
- **Tempo di indurimento totale:** 2:30 min. circa
- **Durezza finale:** 25 Shore A circa
- **Deformazione sotto compressione:** 10 % ± 1 % circa
- **Recupero dopo deformazione:** 99,8 %
- **Variazione dimensionale lineare:** < 0,2 %
- **Lavorazione:** A 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % umidità relativa.
- **Conservazione:**

15°C
59°F
25°C
77°F

Specifiche di ordinazione:

addition mini Junior
Confezione standard **03439**
4 cartucce minimix da 10 ml
8 cannule di miscelazione minimix, verdi
1 punzone, istruzioni

Sacchetto ricambio 03440
8 cartucce minimix da 10 ml
1 punzone, istruzioni

addition mini Sensitive
Confezione standard **03436**
4 cartucce minimix da 10 ml
8 cannule di miscelazione minimix, verdi
1 punzone, istruzioni

Sacchetto ricambio 03437
8 cartucce minimix da 10 ml
1 punzone, istruzioni

Cannule di miscelazione 03446
25 pz. minimix, verdi 1:1

Flexi tube 03448
20 cm per minimix cannule

Pistola-dispenser mini 03447

Tamponi per impronta vent (ventilati) 03449
24 pz., Ø 7 mm